

Un système thérapeutique tout en un.
Sécurité et efficacité. Mobilité et dignité.



**Système thérapeutique
TotalCare™ Bariatric Plus**

Hill-Rom®

L'efficacité des soins, pour les patients et les soignants.™

Le meilleur du système thérapeutique TotalCare™.

Le système thérapeutique TotalCare™ Bariatric Plus associe les meilleures fonctionnalités du lit TotalCare™ et les fonctions spéciales dont vous aurez besoin pour gérer vos patients obèses.

En bref

Mobilité

- Thérapies pulmonaires incluant la thérapie par rotation latérale continue et la thérapie par percussion et par vibration
- Option FullChair™ avec support adaptable pour les pieds en position « fauteuil »
- Possibilité d'abaisser le lit par dégonflage du siège et du bas ; la sortie est plus sûre et plus simple
- Option de sortie du lit sur le côté ou en position « fauteuil »

Dignité

- Un concept esthétique et classique
- Potence d'angle fixe
- Capacité de poids thérapeutique de 227 kg avec une largeur de surface de 102 cm

Sécurité et efficacité

- Le système électrique IntelliDrive™ permet un transport assisté efficace du patient dans son lit
- Repositionnement du patient plus facile avec la fonction Turn Assist
- Le mécanisme de rétractation de la section pied FlexAfoot™ empêche les patients de glisser au bas du lit
- Alarme et inclinaison à 30° et 45° de la tête de lit
- Déclive et remise à plat d'urgence (CPR) HandsFree™

Surfaces de répartition de pression disponibles

- Mousse multicouche
- Surface à air dynamique avec gestion Advanced Microclimate™ et thérapies pulmonaires en option :
 - Thérapie par rotation latérale continue
 - Thérapie par percussion et par vibration



Capacité de poids thérapeutique de 227 kg,
dans un lit au design esthétique.



La potence d'angle fixe permet aux patients de se repositionner eux-mêmes sans demander de l'aide.

Le système TotalCare® Bariatric Plus a remporté en 2008 le prix des Medical Design Excellence Awards (catégorie des dispositifs hospitaliers généraux et produits thérapeutiques).





La surface de répartition de la pression Low Air Loss avec l'option de thérapies pulmonaires permet de prévenir et de traiter les escarres de décubitus et les complications pulmonaires. Comprenant la gestion avancée du microclimat™, la fonction Turn Assist, le dégonflage du siège et du bas du lit, l'option PMax, la thérapie par rotation latérale continue en option, ainsi que les thérapies par percussion et par vibration, toutes ces options ont été conçues pour rendre les soins quotidiens plus simples et plus sûrs.



La transition berceau soutient le patient obèse afin de réduire le glissement lors du passage en position FullChair...



Alarme et inclinaison à 30° et 45° de la tête de lit pour les protocoles de soin.



Simplicité d'utilisation à la fois pour le patient et pour le soignant, grâce aux pictogrammes simples des commandes du lit. Écran tactile équipé d'une interface graphique d'utilisateur qui permet de contrôler les fonctions thérapeutiques avancées.

TotalCare™ Bariatric Plus,
un système thérapeutique tout en un.



Mobilité progressive et dignité.

Permettre aux patients de se déplacer pendant leur séjour et préserver leur dignité à chaque instant.



Dans le lit.

- La potence d'angle fixe permet aux patients de se repositionner eux-mêmes dans leur lit. Conçue pour la sécurité, elle se bloque en position centrale.
- Le mécanisme de rétractation de la section pied FlexAfoot™ permet d'adapter le système de lit selon la taille du patient.
- Les thérapies par rotation latérale continue et par percussion et vibration peuvent être administrées facilement pour aider à évacuer les sécrétions présentes dans les poumons.



Dans le fauteuil.

- La position FullChair™ apporte les avantages de la position « fauteuil » sans déplacer le patient. Grâce au châssis et à la surface intégrés, il suffit d'une simple pression sur un bouton pour mettre le lit en position FullChair™. Cette fonctionnalité réduit le risque de blessure pour le patient et le soignant.
- La transition berceau offre un meilleur soutien pour les patients les plus corpulents lorsqu'ils passent en position FullChair™.




Position debout.

- Le dégonflage du siège et du bas du lit rapproche le patient du sol.
- La position Chair Egress permet une sortie plus simple et en toute sécurité, au pied du lit ou sur le côté, ce qui diminue le risque de blessures pour le soignant.



Sécurité et efficacité.

Protéger les patients et les soignants, et aider à dispenser des soins plus efficaces.

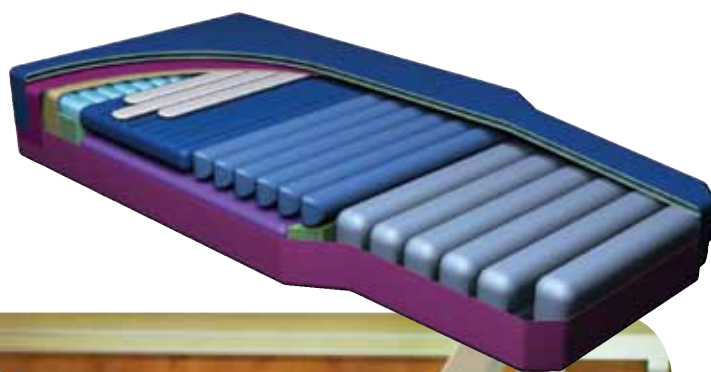

Notre surface à air dynamique répartit la charge sur les parties du corps en contact, ce qui permet de minimiser les lésions tissulaires ainsi que le risque d'escarres de décubitus.

- En fonction du poids du patient, le système d'air ajuste automatiquement la pression.
- L'option Opti-Rest apporte une sensation de confort apaisante tout en répartissant la pression.
- La fonction PMax raffermit la surface rapidement pour une prise en charge des patients améliorée.
- La surface à air dynamique facilite l'administration des thérapies par rotation latérale continue et par percussion et vibration grâce à la simple pression d'un bouton.
- La gestion avancée du microclimat Advanced Microclimate™ permet d'éliminer l'excès de chaleur et l'accumulation d'humidité pour une peau plus fraîche.

Notre surface en mousse multicouche assure également une protection spéciale.

- Cette surface est dotée d'une couche supérieure douce pour le confort du patient, et d'une couche de soutien inférieure.
- La surface assure également une protection spéciale de la zone des talons grâce à sa mousse viscoélastique extensible.
- Elle est conçue pour répartir la pression dans toutes les positions du lit, y compris la position FullChair™.



Transport rapide et efficace.

Avec le système de transport électrique IntelliDrive™, un seul soignant suffit pour transporter un patient obèse.



Des soins réguliers simplifiés.

L'option Turn Assist utilise la surface d'atténuation de la pression du lit pour aider à tourner le patient, ce qui facilite le changement des draps ainsi que d'autres tâches quotidiennes de soins.



Moins de manipulations pour les soignants.

Le mécanisme de rétractation de la section pied FlexAfoot™ permet d'adapter le lit à la taille du patient, ce qui réduit les forces de cisaillement et le glissement du patient vers le pied du lit.

La transition berceau soutient le patient obèse afin de réduire le glissement lors du passage en position FullChair™ (non illustré).



Caractéristiques techniques

Hauteur totale du lit

Position basse – du plan de couchage jusqu’au sol	48,2 cm
Position haute – du plan de couchage jusqu’au sol	94,0 cm
Position basse* – du haut de la surface d’air au sol	54,6 cm
*avec dégonflage du siège et du bas du lit	
Position haute – du haut de la surface à air jusqu’au sol	124,5 cm

Configurations de la surface de couchage disponibles

Épaisseur de la surface – Mousse	24,1 cm
Épaisseur de la surface – Air	27,9 cm
Épaisseur de la surface – Air avec thérapie pulmonaire	27,9 cm
Largeur	102 cm
Longueur, entièrement dépliée	213,4 cm
Longueur, entièrement rétractée	182,7 cm

Largeur totale du lit

Demi-barrières baissées	102 cm
Demi-barrières relevées	106,6 cm

Longueur totale du lit

Entièrement déplié	237,3 cm
Entièrement rétracté	206,8 cm

Angles du lit

Indicateurs d’angle de tête et d’inclinaison	Oui
Tête de lit	0°-65°
Cassure genou	0°-20°
Déclive/proclive max	15°/15°
Position du fauteuil	
Tête	50°-65°
Siège	0°-20°
Pied	0°-10°
Cuisse	10°
Position de sortie	
Tête	65°-75°
Siège	0°-10°
Pied	70°-85°
Cuisse	10°

Système de roulettes et de freinage

Transport électrique IntelliDrive™ en option	Oui
Diamètre de roulettes standard*	15,2 cm
Diamètre de roulettes en option	12,7 cm
Freinage à quatre roues	Oui
Les freins bloquent le roulement et le pivotement	Oui

*Un diamètre de roulettes standard est requis pour l’utilisation du système de transport électrique IntelliDrive.

*Un diamètre de roulettes standard est requis pour une interopérabilité avec les lève-personnes mobiles (p. ex. Liko, Viking, XL)

Système de pèse-personne standard

Précision	1 % du poids du patient
Pesée dans toutes les positions (à l’exception de déclive/proclive)	Oui
Capacité de poids du pèse-personne	227 kg

Pèse-personne OIML – Conforme à la norme EN45501

5 kg – 25 kg	erreur maximum autorisée +/- 0,25 kg
25,5 kg – 100 kg	erreur maximum autorisée +/- 0,5 kg
100,5 kg – 230 kg	erreur maximum autorisée +/- 0,75 kg
Capacité de pesage	de 5 à 230 kg
Tensions nominales disponibles	100 V, 110 V, 120 V, 127 V, 220-240 V CA
Intensité/alimentation	9,9 A / 5,0 A
Fréquence	60 Hz / 50 Hz
Homologation de sécurité	UL60601-1 et CE

Commandes patient

Sur les barrières latérales	Standard
Boîtier de commande	Standard

Potence d’angle

Hauteur	207 cm
---------------	--------

Limites de poids et sécurité

Limite de poids (charge thérapeutique maximale)	250 kg
Limite de poids (patient)	227 kg
Homologation de sécurité	UL60601-1 et CE

Caractéristiques électriques


Alimentation	120 V, CA 60 Hz
Fusible	15 A
Courant maximum	9,9 A

Numéros de modèle

Mousse	TCB-155
Low Air Loss	TCB-655
Low Air Loss avec thérapie pulmonaire	TCB-765

Fonctions de sécurité liées au patient

Alarme de la tête de lit	Standard
Déclive et remise à plat d’urgence (CPR) HandsFree™	Standard
FlexAfoot™	Standard

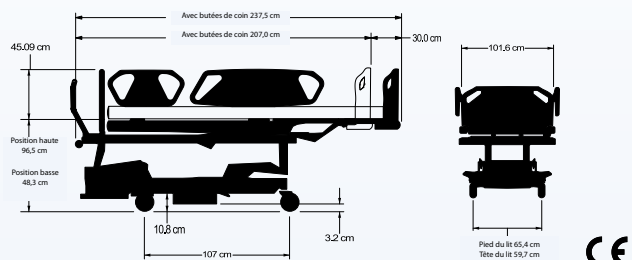

Références : ¹ Ahrens T, Burns S, Phillips J, Vollman K, Whitman J. Progressive Mobility Guidelines for Critically Ill Patients. Advancing Nursing, 2005.

Hill-Rom, ainsi que le logo et le nom Hill-Rom sont des marques de fabrique ou marques déposées de Hill-Rom Services, Inc. TotalCare, FullChair, IntelliDrive, FlexAfoot, HandsFree et Advanced Microclimate sont des marques de fabrique ou marques déposées de Hill-Rom Services Inc. Liko et Viking sont des marques de fabrique ou marques déposées de Liko R&D AB.



L'efficacité des soins, pour les patients et les soignants.™

France	+33 (0)2 97 50 92 12
United Kingdom	+44 (0)1530 411000
Deutschland	+49 (0)211 16450-0
Nederland	+31 (0)347 32 35 32
Italia	+ 39 (0)2 950541
Suisse/Schweiz	+41 (0)21 706 21 30
(deutschsprachig)	+41 (0)21 706 21 38

Österreich	+43 (0)2243 28550
Ireland	+353 (0)1 413 6005
Iberia	+34 (0)93 6856000
Nordic Countries	+46 (0)920 47 47 11
Export	Contact your local Hill-Rom distributor or contact your Area Manager via website or call
	+1 812 934 8173

www.hill-rom.com

Hill-Rom se réserve le droit de modifier la conception, les spécifications et les modèles, sans avis préalable. La seule garantie faite par Hill-Rom est la garantie écrite expresse sur la vente ou la location de ses produits.

© 2010 Hill-Rom SARL, TOUS DROITS RÉSERVÉS