



**Lit AvantGuard 1200**



La gamme de matelas de réduction de pression d'Hill-Rom combinée à l'articulation du plan de couchage du lit AvantGuard permettent de prévenir les escarres et offrent aux patients un confort optimum.



**Lit AvantGuard 1200**

**Description du modèle de base**

- Hauteur variable électrique (40-80 cm)
- Relève-buste électrique à translation et télescopique
- Cassure-genoux électrique
- Partie pied multi-position activée par ressort à gaz
- Fonction auto-contour
- Inclinaison longitudinale +/- 16°
- Plan de couchage en 4 parties avec panneaux extractibles
- Boîtier de commande soignant
- Commandes bilatérales de verrouillage sélectif
- Commande CPR d'urgence bilatérale
- Dossiers moulés tête et pieds extractibles
- 8 poignées pour sangles de contention patient
- Roulettes simple galet de 150 mm de diamètre
- Indicateur de position basse
- Roulette directionnelle (section tête)
- Freinage centralisé sur les 4 roulettes
- Porte-accessoires bilatéral
- 4 protections latérales
- 4 emplacements pour TPS et potence

**Configuration**

	AVG 1205	AVG 1215	AVG 1225	AVG 1235	AVG 1245	AVG 1255	AVG 1265
Modèle de base							
Porte-couverture							
Rallonge sommier							
Poignées de préhension MobiBar™							
Position Shock							
Alarme de sécurité frein désengagé							

**Barrières TotalGuard**

**Options (disponibles sur tous les modèles)**

- Pédale bilatérale de hauteur variable à verrouillage automatique
- Position fauteuil easy chair
- Batterie
- Choix entre 1 ou 2 télécommandes
- Porte accessoire bilatéral 6 crochets ou rail
- Hauteur variable: 45 à 85 cm
- Fonction présence infirmière
- 5<sup>ème</sup> roue (avec roue diamètre 150 mm)
- Roue simple galet, double galet et antistatique double galet de diamètre 150 mm
- Roue simple galet diamètre 125 mm
- Barrières TotalGuard
- Barrières métal
- Dossier Médispace, Séquoia et Médichotel

**Caractéristiques AvantGuard**

**Dimensions**

Position haute (roulettes simple galet de 150 mm)	.....815 mm
Position haute (roulettes double galet de 150 mm)	.....800 mm
Position basse (roulettes simple galet de 150 mm)	.....415 mm
Position basse (roulettes double galet de 150 mm)	.....400 mm
Longueur totale avec extension sommier et dossier composite	.....2405 mm
Longueur totale sans extension sommier et dossier plastique	.....2225 mm
Longueur totale avec extension sommier et dossier bois	.....2400 mm
Longueur totale sans extension sommier et dossier bois	.....2200 mm
Largeur totale avec barrière TotalGuard déployée (min-max)	.....1000-1060 mm
Largeur totale avec barrière TotalGuard repliée	.....985 mm
Largeur totale avec barrière métal	.....1005 mm

**Articulation du lit**

Déclive/Proclive	.....-16° / +16°
Relève-Buste	.....68°
Genoux	.....36° par rapport à l'horizontal
Pieds (AvantGuard avec position EasyChair)	.....23° par rapport à l'horizontal
Pieds (AvantGuard sans position EasyChair)	.....16° par rapport à l'horizontal
Autocontour	.....section jambes 17°
Charge de sécurité	.....185 kg
Capacité maximale de levage	.....250 kg

**CE** Conformément aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux appareils médicaux de classe 1.

**NF** Admis à la marque NF Medical - N° d'autorisation 178-01/01  
Produit conforme aux normes : NF-EN-60601-1 (1996), NF-EN-60601-1-2 (2001), NF-EN-60601-2-38 et amdt 1 (1999), NF-S-90-312 (1984)

**Organisme de réglementation de la qualité et de l'environnement pour les usines de fabrication et de développement** : ISO 9001 (2000) LNE N° 01391 - ISO 13485 (2003) G.MED N° 0851 - ISO 14001 (1996) ECOPASS N° F-563601

**www.hill-rom.com**

France	.....+33 (0)2 97 50 92 12	Suisse/Schweiz	.....+41 (0)21 706 21 30	Nordic Countries	.....+46 (0)8 564 353 60
United Kingdom	.....+44 (0)1530 411000	(deutschsprachig)	.....+41 (0)21 706 21 38	Export	.....contact your local Hill-Rom distributor
Deutschland	.....+49 (0)211/16450-0	Österreich	.....+43 (0)2243 / 28550		.....or contact your Area manager via website
Nederland	.....+31 (0)347 32 35 32	Irland	.....+353 (0)1 413 6005		.....or call +1 812 934 8173
Italia	.....+39 02-950541	Iberia	.....+34 (0)93 685 60 00		

Hill-Rom se réserve le droit de changer tout élément, spécification ou modèle sans notification préalable. La seule garantie dont répond Hill-Rom est la garantie expresse écrite accompagnant le contrat de vente ou de location de ses produits. Fabriqués par Hill-Rom SAS, Pluvigner, France - TOUS DROITS RÉSERVÉS.



**Lit AvantGuard® 1200**  
un système de soins efficace  
pour un environnement ergonomique  
et sûr pour le personnel soignant



Dimension Communication S.A. - PB Lit AvantGuard 1200 - V.0002 - 04/05 - F-1000

## Améliorer vos conditions de travail




### En un coup d'œil :

- Permet de réduire l'effort physique requis lors de la manutention des patients.
- Permet de réduire les escarres en combinant plusieurs possibilités de positionnement avec différentes surfaces de réduction des pressions.
- Améliore la sécurité des patients par la conception révolutionnaire des barrières et de nouvelles fonctions.
- Accroît la mobilité et l'autonomie des patients tout en favorisant leurs rétablissements grâce à un design innovant et ergonomique.
- Facilite la décontamination et la désinfection par son design épuré.

De vastes recherches intégrant plus de 600 professionnels de la santé en Europe ont permis de définir 220 exigences à l'origine du design ergonomique du lit AvantGuard.

Le lit AvantGuard est un outil de travail idéal pour vos activités de soin quotidiennes. Il va réduire les risques de blessures pendant les manutentions du patient et améliorera sa sécurité, son confort et son autonomie.

## Lit AvantGuard 1200 : un design ergonomique amélioré

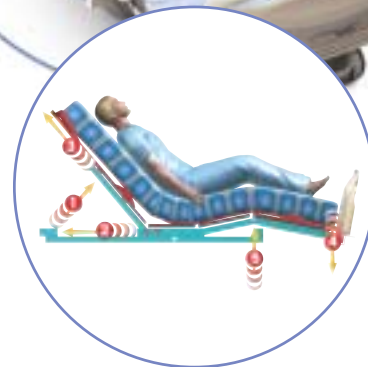

Cinq mouvements coordonnés pour un positionnement optimal

### Diminution de la fréquence de repositionnement

Les cinq mouvements coordonnés permettent d'obtenir une position ergonomique et de maintenir le patient lorsque le lit est articulé, ce qui évite au personnel de repositionner les patients dans leur lit.

### Meilleur positionnement du patient et accélération de sa guérison

La position EasyChair™ permet au personnel soignant d'asseoir rapidement et sans effort le patient par simple appui sur une touche, ce qui accélère son rétablissement.



Aide à la mobilisation



Ajustement au pied de la hauteur variable



Nettoyage facile



Confort et autonomie pour le patient

### Amélioration des conditions de travail

La pédale bilatérale de hauteur variable permet de placer le lit à la hauteur la plus adaptée pour le personnel soignant en diminuant le risque de blessure au dos. Combinée à la poignée MobiBar™, la hauteur variable permet au personnel soignant d'assister le patient pendant l'entrée ou la sortie de lit.

Les commandes soignant sont placées de manière à permettre un accès rapide et facile.

La cinquième roulette améliore la manœuvrabilité du lit et réduit ainsi les efforts nécessaires pour les déplacements dans des couloirs étroits et encombrés.

### Augmentation de l'autonomie et du confort du patient

Des commandes de lit intuitives permettent aux patients de régler eux-mêmes leur position, ce qui diminue les interventions du personnel soignant.

Les larges commandes facilitent leurs utilisations.

La vaste gamme de matelas de réduction de pression d'Hill-Rom combinée aux articulations du plan de couchage offrent au patient un confort optimal.

## Lit AvantGuard 1200 : sécurité accrue



Les barrières TotalGuard s'ajustent automatiquement en un seul mouvement pour s'adapter à une large gamme de matelas.



Poignées de préhension MobiBar



Position basse à 40cm


### Réduction des risques associés à la manutention du patient

Les poignées brevetées MobiBar fournissent un appui aux patients sortant du lit ou y entrant.

Une alarme visuelle placée sur le boîtier de commande avertit le personnel soignant que le lit ne se trouve pas dans sa position la plus basse.

L'alarme sonore de frein désengagé avertit le soignant que le frein n'est pas endenché lorsque le lit est connecté.

Une position basse à 40 cm facilite l'entrée et la sortie du lit et réduit la gravité des chutes des patients.

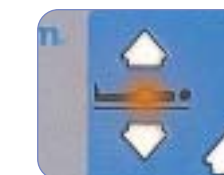

Indicateur "Lit hors de la position basse"



Alarme de sécurité frein engagé



Fonctions d'urgence

### Sécurité des patients garantie

Le lit AvantGuard est équipé de différentes fonctions d'urgence en cas d'aggravation de l'état du patient.

La poignée CPR bilatérale permet d'abaisser doucement le relève-buste en cas d'urgence et de placer le patient en position allongée.

Lorsqu'elle est activée, la position Shock remet le plan de couchage à plat et place le patient en position décline.

Le dossier tête est facilement extractible pour un accès immédiat à la tête du patient.

Grâce au système de freinage centralisé du lit AvantGuard, un appui sur la barre de frein verrouille toutes les roulettes et optimise la sécurité du patient. Pour accroître la sécurité, la pédale de hauteur variable est automatiquement désactivée après utilisation.

Toutes ces fonctions peuvent fonctionner sans secteur grâce à la batterie de secours intégrée.