

Lit AvantGuard® 800



*options

Options

- Plicature-genoux électrique et Autocontour
- Dispositif de condamnation sélective des mouvements électriques sur le côté gauche
- Déclive/proclive mécanique
- Déclive/proclive électrique
- Porte-couverture et rallonge de lit
- 2 barrières métalliques
- 2 barres de préhension
- Batterie de secours
- Boîtier de commande sur bras flexible
- Roulettes double galet de diamètre 150 mm
- Roulettes simple galet antistatique de diamètre 150 mm
- Roulettes double galet antistatique de diamètre 150 mm
- Roulettes simple galet antistatique de diamètre 125 mm
- Roulettes simple galet antistatique intégré de diamètre 150 mm
- Roue directionnelle en pied de lit
- Crochets pour dossier tête amovible

Données techniques

Dimensions du lit

Largeur du lit sans barrières métalliques	955 mm
Largeur du lit avec barrières métalliques	1014 mm
Longueur du lit	2140 mm
Longueur du lit (avec rallonge)	2314 mm

Position haute avec :

• Roulettes simple galet de diamètre 125 mm	755 mm
• Roulettes simple galet de diamètre 150 mm	780 mm
• Roulettes double galet de diamètre 150 mm	775 mm
• Roulettes intégrées de diamètre 150 mm	780 mm

Position basse avec :

• Roulettes simple galet de diamètre 125 mm	390 mm
• Roulettes simple galet de diamètre 150 mm	420 mm
• Roulettes double galet de diamètre 150 mm	415 mm
• Roulettes intégrées de diamètre 150 mm	420 mm

Articulations du lit

Tête	68°
Genoux	28°
Jambes	15°
Déclive/Proclive	-12° / 12°

Charge de fonctionnement en sécurité : 185 Kg



Conformément aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux appareils médicaux de classe 1.



Admis à la marque NF Medical - N° d'autorisation 178-01/01.
AFNOR CERTIFICATION - 11, avenue Francis de Pressensé, 93571 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX
Produit conforme aux normes : NF-EN-60601-1 (1996), NF-EN-60601-1-2 (2001), NF-EN-60601-2-38 et amdt 1 (1999), NF-S-90-312 (1984).

Certifications qualité et environnementale du site de conception et de production : ISO 9001 (2000) LNE N° 01391- ISO 13485 (2003) G.MED N° 0851 - ISO 14001 (1996) ECOPASS N° F-563601

www.hill-rom.com

France	+33 (0)2 97 50 92 12	Suisse/Schweiz	+41 (0)21/706 21 30	Nordic Countries	+46 (0)8 564 353 60
United Kingdom	+44 (0)1530 411000	(deutschsprachig)	021/706 21 38	Export	contact your local Hill-Rom distributor
Deutschland	+49 (0)211/16450-0	Österreich	+43 (0)2243 / 28550		or contact your Area manager via website
Nederland	+31 (0)347 32 35 32	Ireland	+353 (0)1 413 6005		or call +1 812 934 8173
Italia	+39 02-950541	Iberia	+34 (0)93 6856000		

Hill-Rom se réserve le droit de changer tout détail ou spécification ou modèle sans notification préalable dans un souci d'amélioration permanente. La seule garantie dont répond Hill-Rom pour le produit est la garantie expresse écrite accompagnant le contrat de vente ou de location. Fabriqué par Hill-Rom SAS - Pluvigner, France. © 2007 Hill-Rom Services, Inc. - TOUS DROITS RESERVES.

Lit AvantGuard® 800

Confort, sécurité et efficacité pour vous et votre patient.



Design: www.cadmiun.fr - PB Lit AvantGuard®800 V.001 - 07/07 F.





Lit AvantGuard® 800

Amélioration de la sécurité et de l'autonomie des patients

L'AvantGuard® 800 intègre de nombreux dispositifs qui facilitent la manutention du patient et améliorent l'ergonomie de travail pour le personnel soignant. La prise en compte dès la conception de l'AvantGuard® 800 de la sécurité du patient et du personnel constitue un des points forts de ce lit.

Par exemple, les barres de préhension améliorent nettement la sécurité du patient qui peut les utiliser pour entrer et sortir du lit ainsi que pour se repositionner plus librement.



Points clés :

- Plus grande autonomie du patient.
- Diminution des risques de blessures pour le personnel soignant.
- Facilite la manutention du patient.
- Augmente l'efficacité des soins au patient.
- Prise en charge optimale du traitement et de la prévention des escarres en associant les surfaces thérapeutiques.

Depuis de nombreuses années, Hill-Rom s'engage activement en faveur de l'amélioration de la sécurité des lits en collaborant avec les professionnels de la santé, les représentants du gouvernement, l'IEC (International Electro-technical Commission) en charge des lits hospitaliers et divers organismes visant à réduire les risques de piégeage des patients. Hill-Rom a contribué en 1999 à la mise en place du groupe de travail HBSW (Hospital Bed Safety Workgroup) consacré à la sécurité des lits d'hôpitaux sous la supervision et le soutien du Ministère de la santé américain.

Diminution des risques pour le patient

Le lit AvantGuard® 800 descend à 39 cm du sol pour faciliter l'entrée et la sortie du patient tout en limitant le risque et la gravité des chutes éventuelles.

En cas d'urgence, le personnel soignant peut rapidement positionner le lit en position de travail grâce aux fonctions CPR et décline. Le dossier tête peut aussi être retiré instantanément pour dégager rapidement l'accès au patient. Quant aux barrières, elles sont équipées d'une commande de verrouillage double qui confère au lit AvantGuard® 800 un niveau de sécurité optimal.

La pédale de frein de l'AvantGuard® 800, située en pied de lit sur toute la largeur permet au personnel soignant une utilisation aisée et évite une désactivation intempestive par le patient.

L'AvantGuard 800, qui vient compléter la gamme, conserve le principe de la réduction maximale des zones de piégeage.

Amélioration de la qualité des soins

Le lit AvantGuard® 800 intègre de nombreux dispositifs visant à diminuer la charge de travail du personnel soignant. Le gain de temps effectif lors de la réalisation des tâches quotidiennes et répétitives comme la manutention du patient, permet au personnel soignant de se consacrer à des tâches cliniques.

La translation du relèvement-buste et la fonction Autocontour permettent au patient de rester en bonne position dans le lit pour son plus grand confort. Les problèmes de frictions et de cisaillements sont alors considérablement réduits. Le personnel soignant n'a alors plus besoin de repositionner le patient. De plus, le lit AvantGuard® 800 intègre une fonction décline électrique qui permet de repositionner le patient plus efficacement et de mieux répartir la pression.


La rallonge de lit et le porte-couverture simplifient les tâches quotidiennes tandis que les plans de couchage lisses et amovibles facilitent les opérations de nettoyage et de désinfection.

Le lit peut être équipé de nombreux accessoires pour convenir à tous les patients quel que soit leur état.

L'utilisation de la hauteur variable électrique transforme le lit AvantGuard® 800 en véritable outil de convalescence en éliminant quasiment le besoin de soulever le patient pendant les procédures de manutention.

Gamme de matelas recommandés

Le lit AvantGuard® 800 a été spécialement conçu pour la gamme de matelas thérapeutiques Hill-Rom.

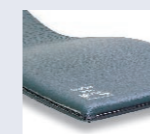

SimCair®



Clinisert 2™



Thermo contour®



Primo™



ClinActiv™



Duo® 2



Commandes intuitives

Grâce à ses commandes intuitives, le lit facilite les tâches essentielles. Par exemple, le boîtier de commande ergonomique monté sur bras flexible reste accessible en toute circonstance au personnel soignant et au patient qui y gagne alors en autonomie.

Mobilisation du patient facilitée

La localisation ergonomique du mécanisme de verrouillage des barrières du lit AvantGuard® 800, évite au personnel soignant de se pencher. De plus, des barres de préhension aident le patient à sortir du lit, il peut ainsi y transférer son poids et utiliser la hauteur variable électrique pour se redresser.

