


Clinisert 2™ Matelas modulaire en mousse à réduction de pression

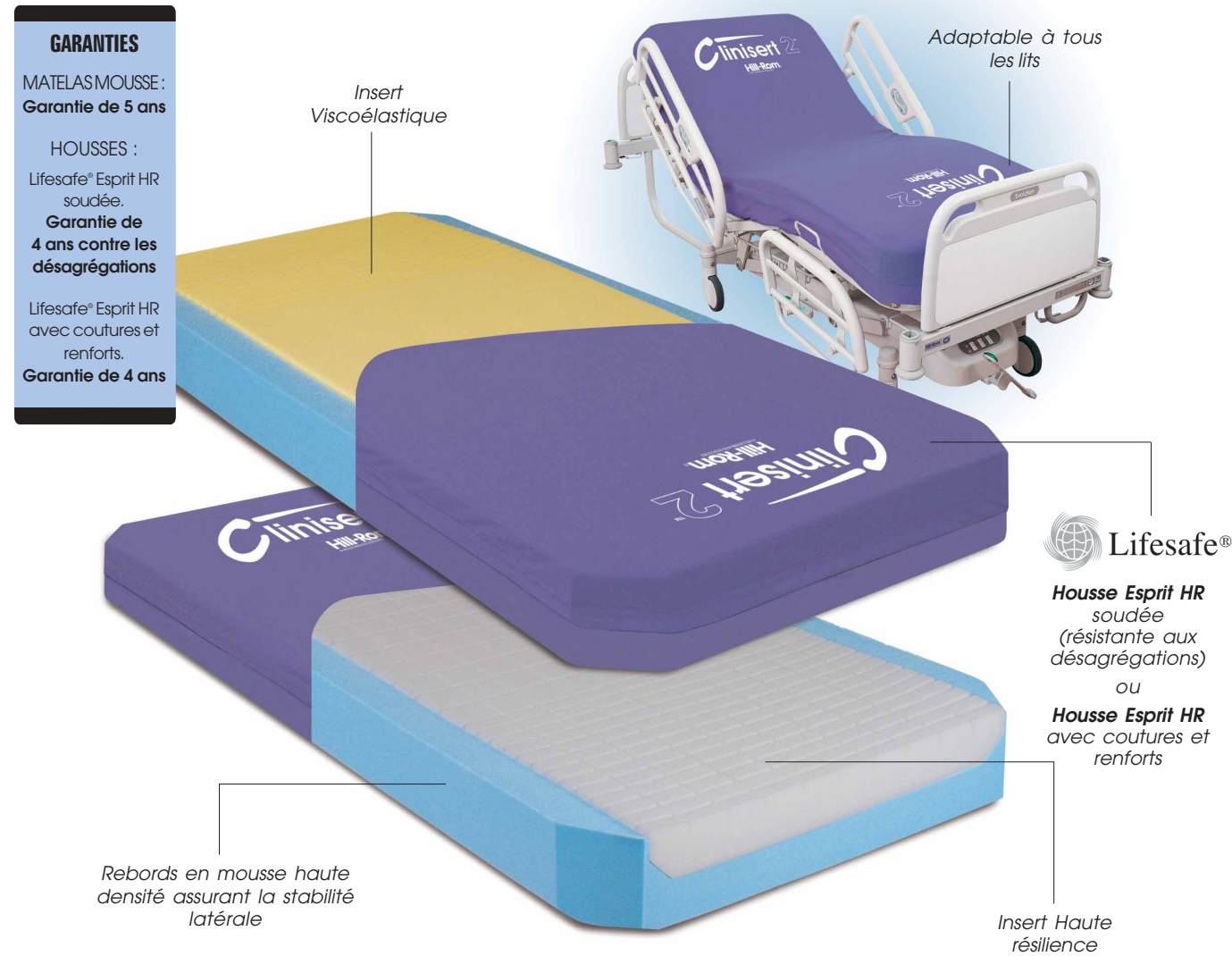

GARANTIES

MATELAS MOUSSE :
Garantie de 5 ans

HOUSES :
Lifesafe® Esprit HR soudée.
Garantie de 4 ans contre les désagréments

Lifesafe® Esprit HR avec coutures et renforts.
Garantie de 4 ans


Rebords en mousse haute densité assurant la stabilité latérale

Lifesafe®

Housse Esprit HR soudée (résistante aux désagréments) ou Housse Esprit HR avec coutures et renforts

Insert Haute résilience

Matelas modulaire en mousse à réduction de pression

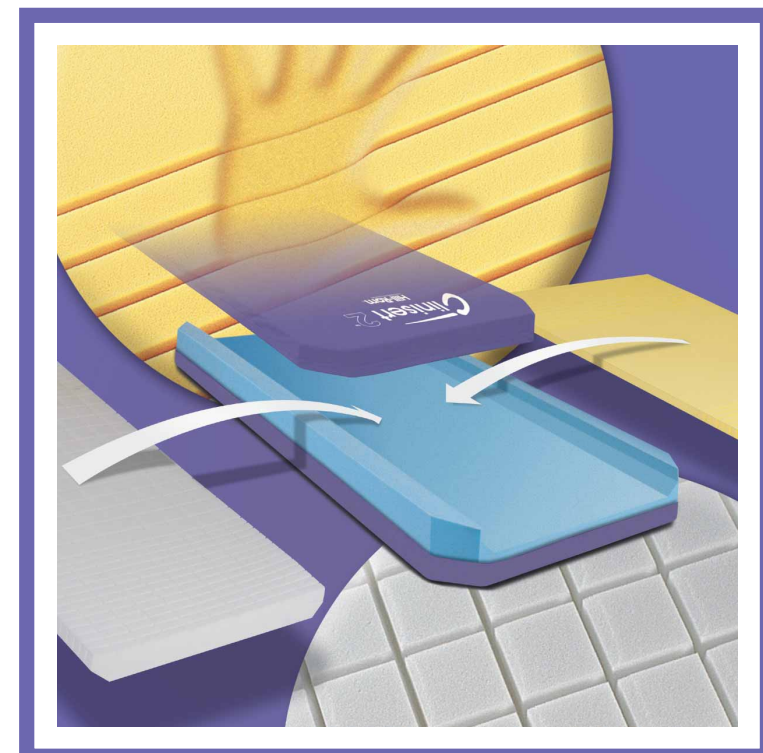









Données techniques

MATELAS :	HOUSES :
Longueur 199 cm	Housse Lifesafe® Esprit HR soudée
Largeur 85 cm	Housse Lifesafe® Esprit HR avec coutures et renforts
Hauteur 15,5 cm	(Nettoyage de surface des housses avec une solution d'Hypochlorite à 1000 ppm).
(autres dimensions disponibles)	
Poids :	Poids maximum recommandé 130 kg
Avec insert Haute résilience 12,5 kg	
Avec insert Viscoélastique 14,5 kg	
INSERTS :	Conformité aux normes anti-feu :
Longueur 199 cm	EN 597 1 & 2, Crib 5; BS 6807 I.S.5, BS 7177 I.S.5, BS 5852 I.S.5. GPEM D1 bis-89, GPEM D1 90 (class A & D)
Largeur 69 cm	
Hauteur 8 cm	CE Conforme à : MDD 93/42/EEC pour classe 1
(variable selon la taille du matelas)	
Densité :	Références :
Insert Haute résilience 40 kg/m ³	1. Tropical test BS 3424 part 12 method 12C
Insert Viscoélastique 60 kg/m ³	2. Tracey C. Cashing in on the benefits offered by total bed management. British Journal of Health Care Management 1998, Vol. 4 No 12.

Clinisert 2™

Hill-Rom
A HILLENBRAND INDUSTRY

- 
 Z.I. du Talhouët - B.P.14
 56330 PLUVIGNER
 Tel: +33 (0)297 50 92 12
 Fax: +33 (0)297 50 92 00
- 
 Clinitron House, Ashby Park,
 Ashby de la Zouch,
 LEICESTERSHIRE LE65 1JG
 Tel: +44 (0)1530 411000
 Fax: +44 (0)1530 411555
 uk.marketing@hill-rom.com
- 
 Airport Business
 Center Düsseldorf,
 Franz-Rennefeld-Weg 4
 40472 Düsseldorf
 Tel: +49 (0)211/16450-0
 Fax: +49 (0)211/16450-182
- 
 Hagenweg 1c, Postbus 173,
 4130 ED VIANEN
 Tel: +31 (0)347 32 35 32
 Fax: +31 (0)347 32 35 00
 E-Mail: info_nl@hill-rom.com
- 
 Via Ambrosoli n. 6
 20090 RODANO (MI)
 Tel: +39 02-950541
 Fax: +39 02-95328578
- 
 Chemin du Vallon 26,
 1030 BUSSIGNY
 Tel: +41 (0)21/706 21 30
 Tel. deutschsprachig:
 021/706 21 38
 Fax: +41 (0)21/706 21 33
 E-Mail: hrch.info@hill-rom.com
- 
 Büropark Donau, Haus 8,
 A-3400 KLOSTERNEUBURG,
 Tel: +43 (0)2243 / 28550
 Fax: +43 (0)2243 / 28550-19
 E-Mail: austria@hill-rom.com
- 
EXPORT
 Contact your local
 Hill-Rom distributor or call:
 Europe: Tel: +33 (0)297 50 92 12
 Tel: +33 (0)467 04 64 04
 Other: Tel: +1 812 934 8173

Hill-Rom
A HILLENBRAND INDUSTRY

HILL-ROM se réserve le droit de modifier les produits présentés à tout moment. www.codmum.fr - PB CLINISERT 2 V.001 - 07/02 F.

Clinisert 2™ Matelas modulaire en mousse à réduction de pression

Un concept modulaire révolutionnaire qui allie une très haute efficacité clinique à une garantie de 4 ans contre toute désagrégation.



Le matelas en mousse Clinisert 2™ contribue à prévenir les escarres pour des patients à risques, et ceci à moindre coût. Le nouveau concept modulaire d'Hill-Rom est constitué d'une base en mousse standard et de deux inserts différents. Le personnel soignant peut choisir entre un insert en mousse Haute résilience et un insert en mousse Viscoélastique. Ces inserts assurent une répartition homogène du poids et améliorent encore le confort du patient.

Ce concept modulaire permet de prendre en charge une plus large variété de patients sur la base d'un matelas UNIQUE. De plus le Clinisert 2™ est un matelas à réduction de pression très économique : les inserts et la housse peuvent se remplacer séparément, évitant le rachat d'un matelas complet.

Enfin, avec ce nouveau concept de matelas associée à sa housse Lifesafe® Esprit HR soudée, Hill-Rom est la première société à avoir pris en compte les deux causes de désagrégation clairement validées.

MOUSSE VISCOELASTIQUE

L'insert Viscoélastique est constitué d'une mousse-gel sensible à la température. Cette mousse se ramollit sous l'effet de la chaleur corporelle et possède une «mémoire» des formes et des pressions. Ces propriétés permettent une répartition homogène du poids et assurent de faibles pressions au niveau des zones à risques, d'où un meilleur confort pour le patient.

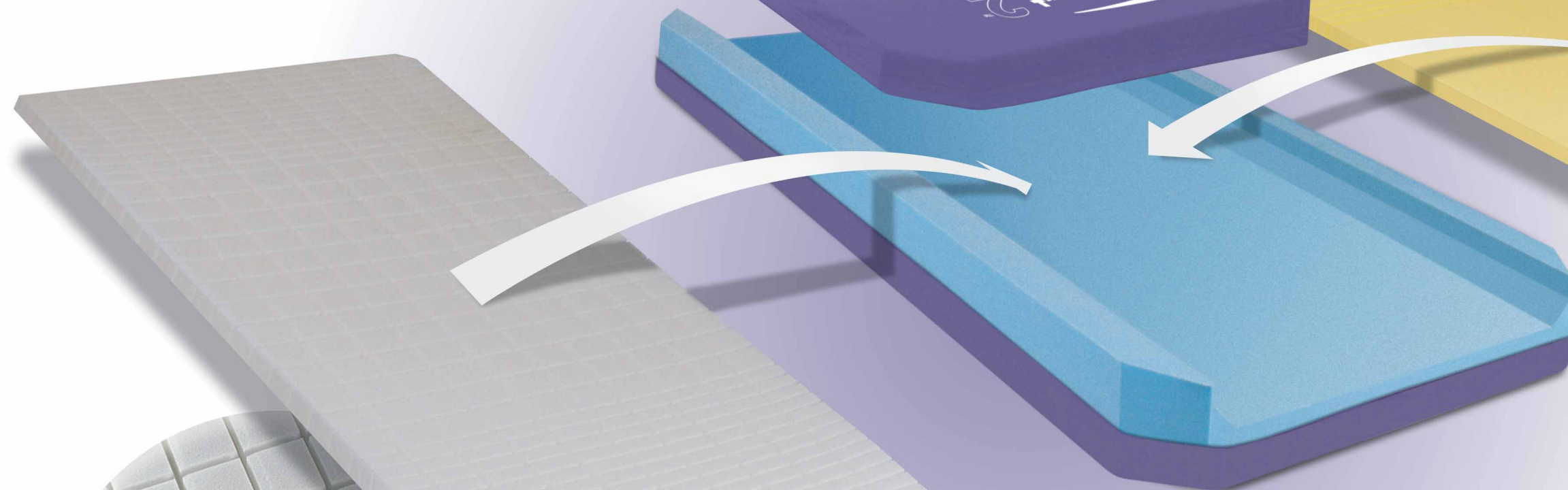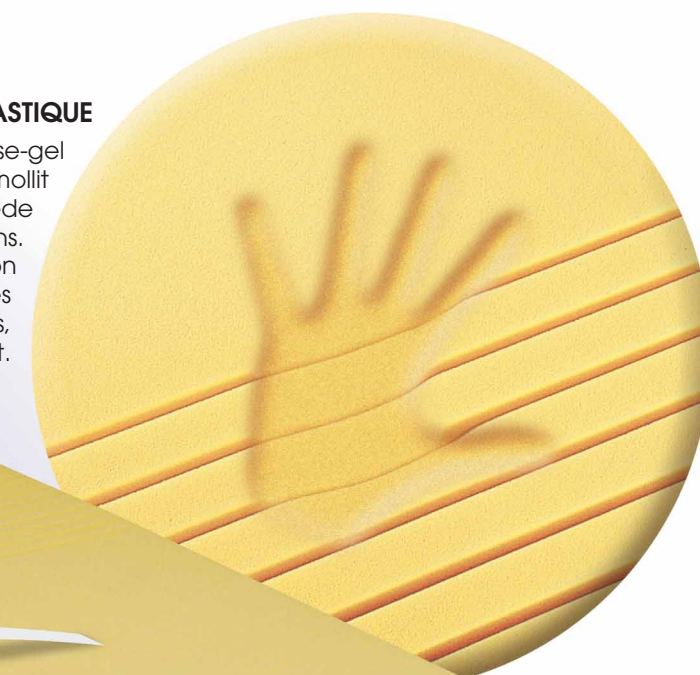

HOUSSE LIFESAFE® ESPRIT HR SOUDEE

Le matériau qui constitue la **housse Esprit HR soudée** allie les qualités techniques d'un tissu extensible et une parfaite résistance aux désagréments.¹

De plus, la housse Esprit HR soudée réduit les frictions et cisaillements, ce qui facilite la mobilisation des patients et limite les risques de lésions dorsales pour le personnel soignant.²

Entre deux patients un simple nettoyage de surface de la housse suffit ce qui rend le Clinisert 2™ immédiatement disponible pour un nouveau patient. L'ensemble des coutures sont soudées, ce qui exclut toute pénétration de liquide.

MOUSSE HAUTE RESILIENCE

L'insert Haute résilience est composé de cubes en mousse qui se compriment individuellement pour s'adapter à la morphologie du patient, optimiser la répartition du poids et réduire les pressions au niveau des zones sensibles.



RESISTANCE AUX DESAGREGATIONS

Avec ce nouveau concept de matelas associé à sa housse Lifesafe® Esprit HR soudée, Hill-Rom est la première société à avoir pris en compte les deux causes de désagrégation clairement validées.

COUT ADAPTE

Clinisert 2™ est un matelas économique : chaque insert en mousse ainsi que la housse peut se remplacer individuellement, ce qui prolonge la durée de vie du produit et accroît son efficacité.

GARANTIE

Hill-Rom garantit l'efficacité de la mousse pendant 5 ans et garantit la housse Esprit HR soudée contre toute désagrégation pendant 4 ans.