

## Gerialit™ 2 - Lit de long séjour médicalisé

### Descriptif du modèle de base

- Relève buste électrique à translation
- Hauteur variable électrique
- Relève jambe mécanique
- Commande filaire
- Boîtier de condamnation des mouvements électriques
- Plan de couchage Cliniplan
- Dossiers tête et pied Décor Mediligne (G2-2, G2-3) et Chrome (G2-4)
- Capot de protection
- Poignée CPR (bilatérale)
- Roulette simple galet 125 mm
- Roulette directionnelle en tête
- Pédale de frein bilatérale
- Freinage central sur 4 roulettes
- 2 supports potence en tête de lit
- 2 dispositifs pour TPS
- 2 crochets pour sac à urine
- 4 dispositifs pour barre de préhension sur sommier
- Coloris au choix dans la gamme Hill-Rom
- MF-HR beige

### Configuration

	G2-2	G2-3	G2-4
<b>Modèle de base</b>			
Cassure genou + autocontour + boîtier sélectif de condamnation			
Pédale bilatérale de HV			
Porte couverture			
Rallonge de lit			

Inclus

### Options

- Dossiers Chrome (tête et pied)
- Dossiers Mediforme (tête et pied)
- Dossier Médic'hôtel (tête et pied)
- Dossiers bois Sequoia (tête et pied)\*
- Dossiers bois Medispace (tête et pied)\*
- Parement décor bois sur châssis
- Aménagement barrières bois sur dossier
- Boîtier de commande sur bras flexible
- Roulette simple galet 150 mm
- Roulette simple galet AS 150 mm
- Roulette double galet AS 150 mm
- Roulette double galet 125 mm
- Roulette double galet 150 mm

### Spécifications techniques (LI 145 Ax)

**Dimensions**  
 Plan de couchage ..... 900 x 2000 mm  
 Plan de couchage – Position haute (roulette D 125 mm)..... 762 mm  
 Plan de couchage – Position basse (roulette D 125 mm)..... 436 mm  
 Plan de couchage – Position haute (roulette D 150 mm)..... 783 mm  
 Plan de couchage – Position basse (roulette D 150 mm)..... 457 mm  
 Longueur totale ..... 2176 mm  
 Largeur totale ..... 970 mm


**Articulation du lit**  
 Relève buste ..... 65°  
 Section Relève jambe ..... 20°  
 Cassure genou ..... 36°  
 Charge normale d'utilisation ..... 170 kg  
 Charge maximale d'utilisation ..... 250 kg

#### Réglementation

Conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de Classe 1.  
 Conforme aux exigences de protections de la directive 89/336/CEE relative à la Compatibilité Électromagnétique (CEM) Groupe 1, Classe B.

Admis à la marque NF MEDICAL.  
 N° d'autorisation 178-01/01.

Conformité aux normes :  
 NF-S-90-312, NF-EN-60601-1, NF-EN-60601-1-2, NF-EN-60601-2-38.

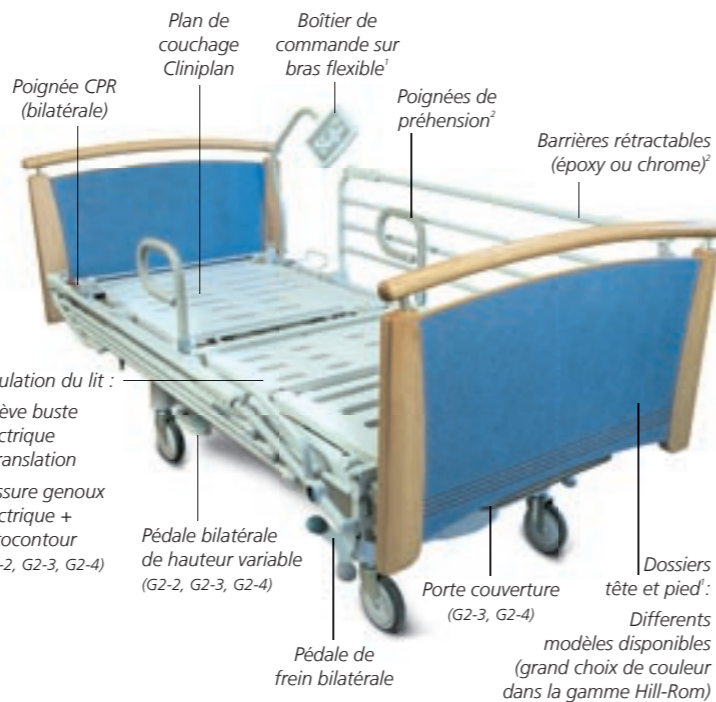

1. Option 2. Accessoire  
 \*Non disponible sur le modèle G2-4

**Gerialit™ 2**  
 La solution adaptée à vos exigences dans la prise en charge des personnes âgées dépendantes.



[www.hill-rom.com](http://www.hill-rom.com)

France .....+33 (0)2 97 50 92 12  
 United Kingdom .....+44 (0)1530 411000  
 Deutschland .....+49 (0)211/16450-0  
 Nederland .....+31 (0)347 32 35 32  
 Italia .....+39 02-950541

Suisse/Schweiz .....+41 (0)21/706 21 30 (deutschsprachig) .....021/706 21 38  
 Österreich .....+43 (0)2243 / 28550  
 Ireland .....+353 (0)1 413 6005  
 Iberia .....+34 (0)93 478 77 49

Nordic Countries .....+46 (0)8 756 07 07  
 Export ..Contact your local Hill-Rom distributor or call:  
 Europe: .....+33 (0)2 97 50 92 12  
 .....+33 (0)4 67 04 64 04  
 Other: .....+1 812 934 8173

Hill-Rom se réserve le droit d'apporter toute modification dans la conception, les caractéristiques ou les modèles sans avis préalable. La seule garantie octroyée par Hill-Rom est la garantie écrite explicite consentie sur la vente ou la location de ses produits. © 2003 Hill-Rom - TOUS DROITS RESERVES. www.cadmium.fr PB Gerialit™ 2 V.001 - 06/03 F 2000 ex.



## Gerialit™ 2 - Lit de long séjour médicalisé

### Ce qu'il faut retenir :

- Conçu pour réduire les risques de lésions musculaires du personnel soignant lors de la manutention des patients.
- Le boîtier de commande sur bras flexible augmente l'indépendance du patient.
- L'autocontour et le relèvement buste à translation électrique optimisent les positionnements.
- Un ensemble de fonctionnalités avancées sécurise la mobilisation.
- Une variété de panneaux tête et pied disponibles dans une large gamme de coloris.



### Manutention sécurisée

La manutention du patient est souvent une opération à risque, aussi bien pour le patient que pour le personnel soignant. Pour améliorer la sécurité, des poignées de préhension ont été spécialement conçues afin d'apporter aux patients des points d'appui lors des différents positionnements.



L'utilisation combinée de la hauteur variable électrique et des poignées de préhension permet de limiter les risques lors des phases de manutention du patient.

De plus, le patient peut s'appuyer sur les poignées de préhension lorsqu'il marche autour du lit.

La nouvelle poignée CPR de remise à plat d'urgence, associée aux panneaux tête et pied à extraction rapide, vous assure un accès rapide au patient en cas de procédure d'urgence.



### Amélioration du confort des patients

L'association du relèvement buste électrique à translation et de l'autocontour optimise le positionnement et le confort du patient tout en réduisant le risque de détérioration de la surface cutanée liée aux frictions.

L'autocontour assure la mise en place automatique de la cassure genou lors de la montée du relèvement buste afin de garantir le confort du patient et de prévenir le risque de glissement vers le pied de lit.

La translation du relèvement buste permet une augmentation de la surface de l'assise afin de limiter les compressions sur l'abdomen du patient.

### Augmentation de l'autonomie des patients

L'augmentation de l'autonomie des patients, un des avantages clés des lits électriques, est fréquemment limité car la télécommande est souvent hors de portée des patients.

Afin d'éliminer ce problème le Gerialit™ 2 est équipé d'un boîtier de commande sur bras flexible facile à utiliser et qui suit les mouvements du lit. Les larges pictogrammes et une interface utilisateur simple rendent son utilisation aisée, spécialement pour les personnes malvoyantes.

### Panneaux et coloris

Hill-Rom vous propose une variété de panneaux tête et pied ainsi qu'une large gamme de coloris afin de pouvoir coordonner vos lits avec le mobilier environnant et la décoration des chambres.

Pour recevoir la gamme de coloris complète veuillez contacter votre représentant Hill-Rom le plus proche.

