

*Option

Spécifications techniques

| | | | |
|---|----------------|--|-------------|
| Position basse - Sol/Plan de couchage | Transtar 55 cm | Barrières rangées | 67 cm/77 cm |
| | Traumato 65 cm | Longueur barrières | 119 cm |
| Position haute - Sol/Plan de couchage | Transtar 89 cm | Hauteur barrières/Plan de couchage | 37 cm |
| | Traumato 98 cm | Angulation relève buste | 90° |
| Dimension matelas : standard | 66 x 190 cm | Proclive/Déclive | 18° |
| option extra-large . | 76 x 190 cm | Hauteur sous châssis | 9 cm |
| Longueur hors tout | 211 cm | Hauteur sous colonnes hauteur variable | 5 cm |
| Largeur hors tout std./option extra-large : | | Diamètre roues | 200 mm |
| Barrières levées | 81 cm/91 cm | Angulation cassure genoux - option | 25° |

CE Dispositif médical de Classe I conforme aux exigences de la directive MDD 93/42



ZI. du Talhouët - B.P. 14
56330 PLUVIGNER
Tél. +33 (0)2 97 50 92 12
Fax +33 (0)2 97 50 92 00



Clintron House, Ashby Park,
Ashby de la Zouch,
LEICESTERSHIRE LE65 1JG
Tél. +44 (0) 1530 411000
Fax +44 (0) 1530 411555



Airport Business
Center Düsseldorf,
Franz-Rennefeld-Weg 4
40472 DÜSSELDORF
Tél. +49 (0) 211/6450-0
Fax +49 (0) 211/6450-182



Hagenweg 1c, Postbus 173,
4130 ED VIANEN
Tél. +31 (0)347 32 35 32
Fax +31 (0)347 32 35 00
E-mail: info_nl@hill-rom.com



Via Ambrosoli n. 6
20090 RODANO (MI)
Tél. +39 02-950541
Fax +39 02-95328578



Chemin du Vallon 26,
1030 BUSSIGNY
Tél. +41 (0)21/706 21 30
Tél. deutschsprachig:
021/706 21 38
Fax +41 (0)21/706 21 33
E-mail: hchinfo@hill-rom.com



Büropark Donau, Haus 8,
A-3400 KLOSTERNEUBURG
Tél. +43 (0)2243 / 28550
Fax +43 (0)2243 / 28550-19
E-mail: austria@hill-rom.com



EXPORT
Contact your local
Hill-Rom distributor or call:
Europe Tel. +33 (0)2 97 50 92 12
Tel. +33 (0)4 67 04 64 04
Other Tel. 1 812 934 8173

Brancard



HILL-ROM se réserve le droit de modifier les produits présentés à tout moment. DIMENSION COMMUNICATION S.A. - PB Transtar 09/2000 F.1000



Ligne de brancards extrêmement mobiles et rapides à nettoyer

Prises en mains intuitives, 5^{ème} roue-pivot, frein unique et protections contre les chocs sont quelques-uns des avantages qui font de TranStar un brancard très maniable et résistant.

Le capot arrondi, la surface plane de couchage, le design des colonnes de hauteur variable et les trous d'évacuation des liquides garantissent la facilité et l'efficacité de son entretien.


Il peut être dédié à des activités d'urgences, de traumatologie et de réveil.



Nettoyage facile et rapide


Système de 5^e roue

URGENCES

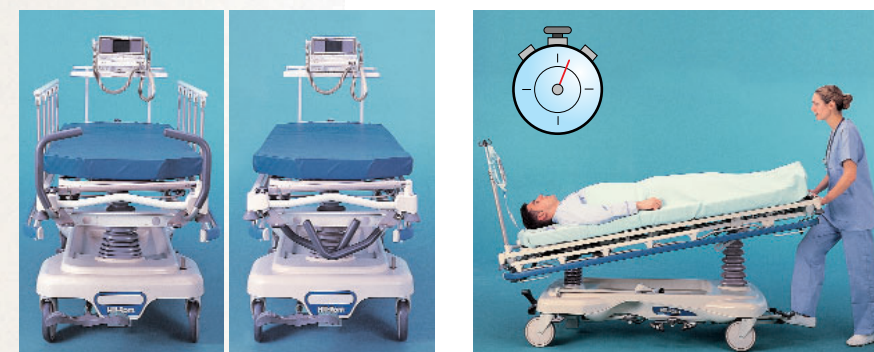

Organisation rapide des équipements. Transferts du patient plus faciles. Déclive et accès à la tête immédiats. Pédales latérales des mouvements de sommier pour intervention rapide. Stabilité et robustesse pour réanimation cardio-respiratoire. TranStar est taillé pour la rapidité d'action.

TRAUMATO

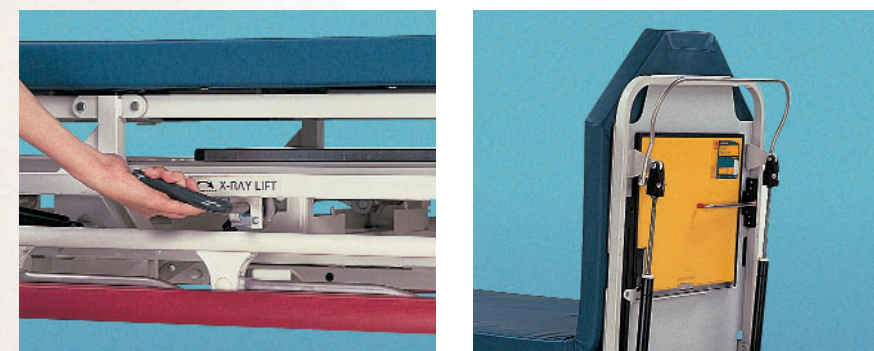

Positionnement de la cassette radiographique

Radiographie pulmonaire

TranStar Traumatolo est un brancard fiable et performant, idéal pour toutes les situations où la rapidité est primordiale. Les cassettes radiographiques peuvent être positionnées très précisément, de la tête au pied, tout près du matelas pour obtenir une qualité d'image optimum.

RÉVEIL



Option couchage extra-large

Option matelas 13 cm

Confortable comme un lit, TranStar offre un couchage extra-large pour un bon positionnement, un matelas profond et performant pour la réduction des pressions de contact et des positions de sommier facilement ajustables.