

Table de lit TA 529



Ce qu'il faut retenir :

- Un piètement en U permettant l'utilisation de la table avec chaises et fauteuils.
- Un plateau de forme anatomique pour un meilleur confort de l'utilisateur.
- Un réglage simple et aisé de la hauteur variable.
- Coloris au choix dans la gamme Hill-Rom.

Optimise l'environnement du personnel soignant et du patient

Hill-Rom a conçu une table de lit fonctionnelle et ergonomique qui facilite sa mise en place par le personnel soignant.

En s'adaptant parfaitement aux autres mobiliers, elle améliore aussi la gestion de l'espace dans la chambre et réduit les contraintes journalières.

Table de lit TA 529


Spécifications

Piètement :

Mécano soudé en U, en tube de diam. 32 en acier traité époxy beige, monté sur 4 roulettes. Deux montants en tube diam. 36 mm et 28 mm comprenant le système de blocage automatique multi positions et le système d'équilibrage avec bague polyamide.

Plateau anatomique :

Epaisseur 18 mm stratifié ou médium dessus plaqué stratifié. Galerie époxy beige. Réglettes d'arrêt en plastique beige. Le plateau est monté sur deux traverses en tube méplat de 15 x 30 mm, traité à l'époxy. Coloris au choix dans la gamme Hill-Rom.

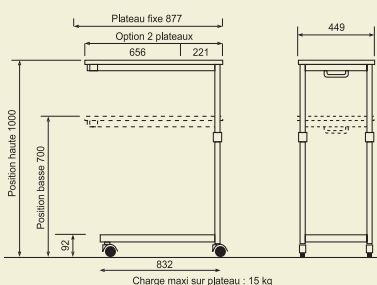

La forme du plateau facilite la préhension de la poignée de hauteur variable.



La table de lit TA 529 s'adapte parfaitement aux autres mobiliers de la chambre, en milieu hospitalier et en environnement de long séjour médicalisé.



Table TA 529 F :
1 plateau fixe stratifié.



Table TA 529 G :
2 plateaux stratifiés dont 1 réglable en position lecture.



Table TA 529 H :
1 plateau fixe en médium, dessus plaqué stratifié.



Table TA 529 I :
2 plateaux en médium dessus plaqué stratifié, dont 1 réglable en position lecture.

www.hill-rom.com

France+33 (0)2 97 50 92 12
 United Kingdom+44 (0)1530 411000
 Deutschland+49 (0)211/16450-0
 Nederland+31 (0)347 32 35 32
 Italia+39 02-950541

Suisse/Schweiz+41 (0)21/706 21 30
 (deutschsprachig)021/706 21 38
 Österreich+43 (0)2243 / 28550
 Ireland+353 (0)1 413 6005
 Iberia+34 (0)93 478 77 49

Nordic Countries+46 (0)8 756 07 07
Export .. Contact your local Hill-Rom distributor or call:
 Europe:+33 (0)2 97 50 92 12
+33 (0)4 67 04 64 04
 Other:+1 812 934 8173

Hill-Rom se réserve le droit d'apporter toute modification dans la conception, les caractéristiques ou les modèles sans avis préalable. La seule garantie octroyée par Hill-Rom est la garantie écrite explicite consentie sur la vente ou la location de ses produits. © 2003 Hill-Rom - TOUS DROITS RESERVES. www.cadmium.fr - V.001 - 06/03 F



USA & Canada
 Western & Eastern Europe
 Middle East / Africa /
 Sub Indian Continent
 Asia Pacific

Hill-Rom
 A HILLENBRAND INDUSTRY