



Table de lit TA 519

La table à manger TA 519 s'adapte à l'utilisateur pour un meilleur confort et facilite le travail du personnel soignant, de jour comme de nuit.

Parfaitement équilibrée, cette table est équipée d'un réglage simple et aisé de la hauteur variable qui s'ajuste manuellement ou simultanément à la montée du lit.

Les rondeurs de la table sécurisent son utilisateur.



- SIMPLE
- ROBUSTE
- PERFORMANTE
- ADAPTÉE

Les tables de lit TA 519

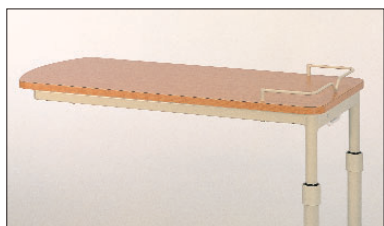


Table TA 519 F.
1 plateau fixe, stratifié, coins arrondis.

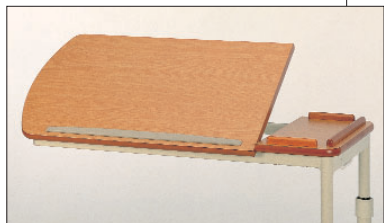


Table TA 519 I.
2 plateaux dessus médium, plaqué stratifié dont 1 position lecture.

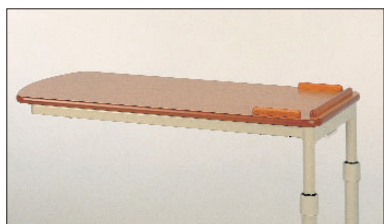


Table TA 519 H.
1 plateau fixe, dessus médium, plaqué stratifié.



Table TA 519 G
2 plateaux stratifiés coins arrondis
dont 1 position lecture

Poignée de hauteur variable.

Qualités de fabrication


Le piétement :

Mécano soudé en U, en tube rectangulaire de 40 x 20 mm en acier traité époxy beige, monté sur 4 roulettes. Deux montants en tube Ø 36 mm et 28 mm comprenant le système de blocage automatique multi-positions et le système d'équilibrage avec bagues polyamide.

Le plateau :

Épaisseur 18 mm, stratifié aux coins arrondis ou dessus médium plaqué stratifié (coloris au choix). Galerie époxy beige ou galerie bois selon les modèles. Réglette d'arrêt en plastique beige. Le plateau est monté sur 2 traverses en tube méplat de 15 x 30 mm, traité à l'époxy. **Coloris stratifiés au choix dans la gamme Hill-Rom.**

Caractéristiques techniques (en mm)

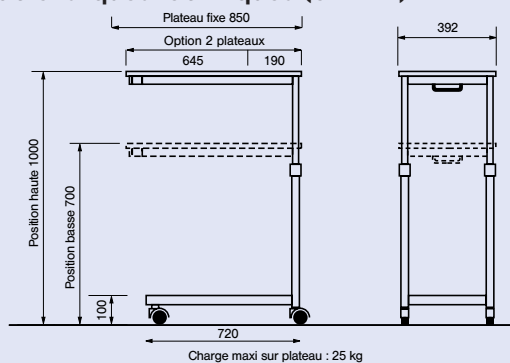

Hill-Rom®
A HILLENBRAND INDUSTRY



Z.I. du Talhouët - B.P. 14
56330 PLUVIGNER
Tél. +33 (0)2 97 50 92 12
Fax +33 (0)2 97 50 92 00



Clintron House, Ashby Park,
Ashby de la Zouch,
LEICESTERSHIRE LE65 1JG
Tel. +44 (0) 1530 411000
Fax +44 (0) 1530 411555



Airport Business
Center Düsseldorf,
Franz-Rennefeld-Weg 4
40472 DÜSSELDORF
Tel. +49 (0) 211/16450-0
Fax +49 (0) 211/16450-182



Hagenweg 1c, Postbus 173,
4130 ED VIANEN
Tel. +31 (0)347 32 35 32
Fax +31 (0)347 32 35 00
E-mail: info_nl@hill-rom.com



Via Ambrosoli n. 6
20090 RODANO (MI)
Tel. +39 02-950541
Fax +39 02-95328578



Chemin du Vallon 26,
1030 BUSSIGNY
Tél. +41 (0)21/706 21 30
Tel. deutschsprachig:
021/706 21 38
Fax +41 (0)21/706 21 33
E-mail: hrchinfo@hill-rom.com



Büropark Donau, Haus 8,
A-3400 KLOSTERNEUBURG
Tel. +43 (0)2243 / 28550
Fax +43 (0)2243 / 28550-19
E-mail: austria@hill-rom.com



EXPORT
Contact your local
Hill-Rom distributor or call:
Europe Tel. +33 (0)2 97 50 92 12
Tel. +33 (0)4 67 04 64 04
Other Tel. 1 812 934 8173