

Table de lit TA 270

Ergonomie, fiabilité et sécurité
pour vous et vos patients



Ce qu'il faut retenir :

- Une stabilité maximale en toutes circonstances.
- Une solidité extrême, un entretien facile et rapide.
- Un système de réglage simple et aisément accessible.
- Une sécurité optimale pour les patients grâce au système Autolift®.
- Un design moderne et élégant coordonné à la gamme Meltis®.

Optimisez et sécurisez votre environnement de soin et celui de vos patients

Soucieux de faciliter le quotidien des personnels soignants, Hill-Rom a conçu pour vous une gamme innovante de tables ergonomiques et fonctionnelles.

Pratique et maniable, la table de lit TA 270 améliore le confort, la sécurité et le bien-être de vos patients.

Enfin, la conception moderne du plateau garantit une durabilité externe et permet un large choix de coloris.

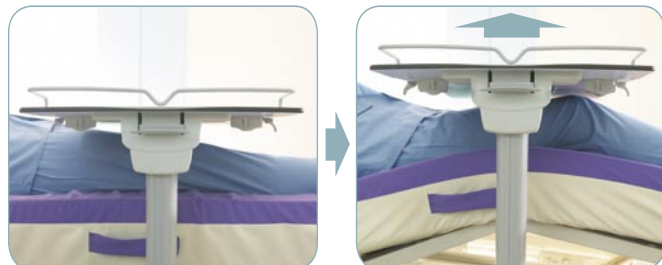


Table de lit TA 270

Ergonomie, fiabilité et sécurité pour vous et vos patients.

Sécurité fonctionnelle

Le système Autolift® garantit une sécurité optimale en réduisant les risques de piégeage et de renversement. Une simple poussée vers le haut relève et bloque automatiquement le plateau dans la position souhaitée.



Données techniques

- Colonne, piétement et support de plateau en acier traité époxy gris métallisé.
- Capotage de piétement et de sommet de colonne en polymère ABS gris teinté dans la masse.
- Piétement monté sur 4 roulettes à double galets avec pare-fil.

Dimensions :

- Hauteur variable assistée réglable..... 73 / 108 cm
- Nez de piétement 31 cm
- Occupation au sol du pied en H symétrique..... 94 x 49 cm
- Plateau TA270 FT (fixe) 96 x 45 cm
- Plateau TA270 TT (fixe + mobile)..... (22 x 45) + (22 x 74) cm
- Angle plateau mobile en position lecture..... +/- 30° (rotation intégrale possible)
- Epaisseur plateau résine 8 mm (pas de pénétration de liquides possible, résistance aux chocs et aux brûlures, classement feu M1)
- Encombrement total en épaisseur du plateau et du support 5,5 cm
- Charges maximales :
 au centre 30 kg
 en tout point 16 kg

www.hill-rom.com

France+33 (0)2 97 50 92 12
 United Kingdom+44 (0)1530 411000
 Deutschland +49 (0)211/16450-0
 Nederland+31 (0)347 32 35 32
 Italia +39 02-950541

Suisse/Schweiz +41 (0)21/706 21 30 (deutschsprachig)021/706 21 38
 Österreich +43 (0)2243 / 28550
 Ireland +353 (0)1 413 6005
 Iberia +34 (0)93 6856000

Nordic Countries+46 (0)8 564 353 60
 Exportcontact your local Hill-Rom distributoror contact your Area manager via website or call +1 812 934 8173

Hill-Rom se réserve le droit de changer tout détail ou spécification ou modèle sans notification préalable dans un souci d'amélioration permanente. La seule garantie dont répond Hill-Rom pour le produit est la garantie expresse écrite accompagnant le contrat de vente ou de location. Fabriqué par Hill-Rom SAS - Pluvigner, France. © 2007 Hill-Rom Services, Inc. - TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Design ergonomique

Grâce à son piétement ergonomique en H, la table de lit TA 270 s'adapte à chaque environnement tout en conservant une stabilité maximale.



Pourvue d'un nez étroit, elle peut être manipulée facilement par le personnel soignant dans la chambre du patient. La table s'adapte à tous les lits, y compris ceux équipés d'une 5^{ème} roue.

Les bordures de confort permettent d'accéder facilement aux poignées de commande et lui confèrent un design épuré et élégant.



Position lecture

Offrez à vos patients une position de lecture optimale, grâce aux plateaux en résine orientables à 30°.



Entretien simplifié

Facilitez et optimisez votre travail grâce à un plateau à rotation complète simplifiant l'entretien.



Plateau fixe

Choisissez selon vos besoins un plateau fixe ou orientable.



USA & Canada
 Western & Eastern Europe
 Middle East / Africa /
 Indian Sub-Continent
 Asia Pacific