



Anatome: una rivoluzione...

Per il design ergonomico, la facilità di utilizzazione e la struttura leggera Anatomie non si qualifica solo come l'ennesima poltrona medica. Costituisce invece un sussidio indispensabile per l'assistenza medica, offrendo una maggiore praticità al personale infermieristico.

- **SI ADATTA ALLA MORFOLOGIA INDIVIDUALE**
- **PREVIENE LE LESIONI DA DECUBITO**
- **ERGONOMICA E FACILE DA UTILIZZARE**



Anatome



Anatome facilita il trasferimento dei pazienti

La flessibilità di Anatome (poggiatesta e braccioli estraibili, controllo altezza) garantisce che il paziente venga trasferito in piena sicurezza.



Anatome migliora il comfort e la sicurezza dei pazienti

La poltrona Anatome si adatta alle morfologie individuali, offrendo allo stesso tempo una vasta gamma di possibilità di posizionamento. Il paziente quindi può rilassarsi in un ambiente del tutto sicuro.



Anatome consente un'assistenza più efficace

La vasta gamma di accessori (sostegno collo AC 901 A, asta porta-flebo, AC 926 A e 941 A, piano tavolo regolabile in ABS AC 969 P) garantisce costantemente un'assistenza del miglior livello.

E per la prevenzione dei decubiti la poltrona Anatome offre un cuscino particolare ("comfort-prevenzione) AC 947 A.

Dati tecnici

SM 647A : Altezza fissa

Struttura base: saldatura epossidica.
Sezione seduta/schienale e poggiatesta: struttura tubolare su base in ABS termoformato.
Imbottitura in gommapiuma rimovibile, senza giunzioni, conformata sul posto.
Poggiatesta inclinabile, regolabile e estraibile.
Asta porta-flebo e supporti sacchetti di drenaggio incorporati.
Quattro ruote di 125 mm di diametro, di cui due frenanti.
Poggia piedi estraibile in termoplastica.
Maniglie posteriori.
Sezione schienale reclinabile con comandi movimento su entrambi i lati.
Rivestimento in tessuto impregnato in PVC in colore a scelta.
Nota: questo modello ha un'altezza fissa di 51 cm


SM647B: Altezza variabile. Oltre alle specifiche del Modello 647 A, questo prodotto presenta le seguenti caratteristiche:

Sistema di freno centrale controllato da due pedali che fungono anche da paracolpi.
Ruote a guida direzionale con sistema di blocco.
Quattro ruote in gomma semisferiche di 125 mm, di diametro, compresa una ruota a guida direzionale con blocco automatico.
Comando idraulico dell'altezza, da 450 a 690 mm, azionato tramite pedali collocati su entrambi i lati, soluzione ideale sia dal punto di vista ambientale che da quello del trasferimento e dell'assistenza nelle sue varie forme.
Le sezioni seduta e schienale si inclinano insieme all'indietro per un comfort e una sicurezza completi.

CONFORMITA' AGLI STANDARD

D 60-070, D 61-070 - NF EN 1021-1, NF EN 1021-2
Conforme alle indicazioni D3-89 GPEM/CP riguardanti gli standard per incendi.
Classe M1F2 per poggiatesta e poggia piedi in plastica.

DIMENSIONI: mm

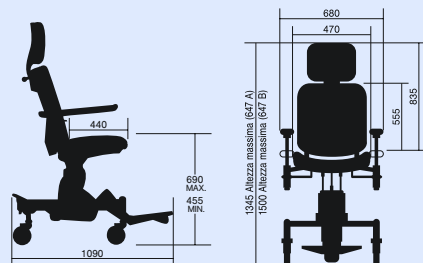

Hill-Rom
A HILLENBRAND INDUSTRY



Z.I. du Talhouët - B.P. 14
56330 PLUVIGNER
Tél. +33 (0)2 97 50 92 12
Fax +33 (0)2 97 50 92 00



Clintron House, Ashby Park,
Ashby de la Zouch,
LEICESTERSHIRE LE65 1JG
Tél. +44 (0) 1530 411000
Fax +44 (0) 1530 411555



Airport Business Center
Düsseldorf
Franz-Rennefeld-Weg 4
40472 DÜSSELDORF
Tél. +49 (0) 211/16450-0
Fax +49 (0) 211/16450-182



Hagenweg 1c, Postbus 173,
4130 ED VIANEN
Tél. +31 (0)347 32 35 32
Fax +31 (0)347 32 35 00
E-mail: info_nl@hill-rom.com



Via Ambrosoli n. 6
20090 RODANO (MI)
Tél. +39 02-950541
Fax +39 02-95328578



Chemin du Vallon 26,
1030 BUSSIGNY
Tél. +41 (0)21/706 21 30
Tel. deutschsprachig:
021/706 21 38
Fax +41 (0)21/706 21 33
E-mail: hrchinfo@hill-rom.com



Büropark Donau, Haus 8,
A-3400 KLOSTERNEUBURG
Tél. +43 (0)2243 / 28550
Fax +43 (0)2243 / 28550-19
E-mail: austria@hill-rom.com



EXPORT
Contact your local
Hill-Rom distributor or call:
Europe Tel. +33 (0)2 97 50 92 12
Tel. +33 (0)4 67 04 64 04
Other Tel. 1 812 934 8173